
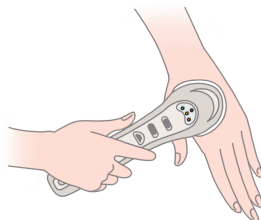
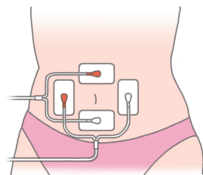


ミューフル美顔器

取扱説明書

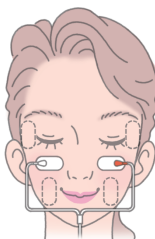

はじめに

- このたびは、ミューフル美顔器をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
安全にご使用頂くためにも、必ず取扱説明書をお読みください。
また、本取扱説明書には、保証書が添付されておりますので大切に保管願います。

ミューフル美顔器の特長

1. 最新技術を駆使した特殊パルスの組み合わせにより効率的なトリートメントを可能にしました。
(PAT NO. 3663154)
 2. 音リードによる腹式呼吸で効率アップ。(特許出願中)
 3. エンベロープ(包む)効果で新感触のリラックストリートメントが実現しました。
 4. 本体のみで頭から手足の先までのトリートメントができます。
 5. 操作は簡単、どなたにでもご利用いただけます。
 6. 小型軽量でコンパクト、持ち運びが大変便利で、ご利用場所を選びません。
 7. ご自身はもとより、他の方へのトリートメントも可能です。
 8. EMS機能付きでシェイプアップ。
- ※ EMSを行いながら、本体による同時のトリートメントが可能です。

安全上のご注意

本商品を安全に正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をお読みください。

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

	危険	誤った取り扱いにより、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
	警告	誤った取り扱いにより、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いにより、人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

＊物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例	
	△記号は注意(警告・危険を含む)を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“特定しない一般的な注意、警告、危険”を示します。
	⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。
	Ⓛ記号は強制(必ず守ること)を示します。具体的な強制内容は、Ⓛの中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、“特定しない一般的な使用者の行為”を示します。

安全上のご注意

⚠ 危険

下記のような医療電子機器との併用は、誤動作を招くおそれがありますので使用しないでください。

- 1) ペースメーカー等の体内埋込型医療電子機器
- 2) 人工心肺等の生命維持用医療電子機器
- 3) 心電計等の装着型の医療電子機器



⚠ 警告

次の人は、医師と相談してご使用ください。

- 1) 急性疾患のある人
- 2) 悪性腫瘍のある人
- 3) 感染症疾患のある人
- 4) 妊娠している人
- 5) 心臓に障害のある人
- 6) 熱の高い人
- 7) 血圧に異常のある人
- 8) 皮膚知覚障害又は、皮膚に異常のある人
- 9) その他医師の治療を受けている時や、とくに身体に異常を感じている時など。



心臓の近く及び口中や陰部、皮膚疾患などには使用しないでください。

- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。



他の美容器との同時使用は、しないでください。

- 気分が悪くなったり、体調不良を起こす恐れがあります。



修理、改造は行わないでください。

- 異常作動をして、けがをすることがあります。



低周波トリートメントの目的以外の使用はしないでください。

- 事故やトラブルにつながる恐れがあります。



コンタクトレンズを装着されている方は、眼周辺をトリートメントする場合、必ずはずしてください。

- 事故やトラブルにつながる恐れがあります。



安全上のご注意

⚠ 注 意

美顔器や身体に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。 特に発疹、カブレ等のヒフに異常を感じたら医師に相談してください。 ● 事故や体調不良を起こす恐れがあります。	
幼児やご自分で意思表示ができない方へのご使用はさせていただきます。 ● 事故や体調不良を起こす恐れがあります。	
浴室等の湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。 ● 装置の故障につながる恐れがあります。	
自動車を運転しながら使用しないでください。 ● 強い刺激を受けると事故やトラブルにつながる恐れがあります。	
就寝時には使用しないでください。 ● 電極コード断線事故やトラブルにつながる恐れがあります。	
電極にベルト、ネックレスなどの金属がふれないようにしてください。 ● 強いショックを受けます。	
直射日光の当るような温度の高いところや、湿度の高いところに置かないでください。	
使い終わった電池を火中に投入しないでください。 ● 電池が破裂し、事故やトラブルにつながる恐れがあります。	

お 願 い

コードの接続部は極端に折り曲げたり引っぱったりしないでください。
本体およびACアダプターからコードのプラグを抜くときは、コードを引っぱらず、プラグをもって抜いてください。
使用後は必ず電源を切ってください。 (off にする)
本体を高いところから落としたり、振動を与えたりしないでください。

本体および付属品の説明

インジケーター

レッド点滅：点灯時刺激強：VIB /on
 消灯時刺激弱
 グリーン点灯：SHIFT soft/on
 イエロー点灯：SHIFT mid/on
 オレンジ点灯：SHIFT hard/on

SHIFT シフトスイッチ

soft：刺激間隔が遅い
 mid：刺激間隔が中くらい
 hard：刺激間隔が早い

VIB バイブスイッチ

on：ピンヘッド振動
 off：停止

LEVEL 電源スイッチ/ボリューム

右回転で電源/ON
 さらに回転させると
 パルスレベルがアップ

取手プレート


導電性ゲルパッド

(赤) (白)

導電性ゲルパッド

(白) (赤)


※USBプラグの上下の向きに
 注意して接続してください。

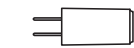

USBプラグ

※家庭用電源コン
 セント (AC100V)
 に接続します。

ACアダプター
 接続ケーブル

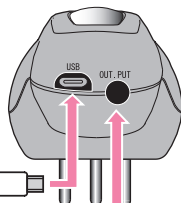

マイクロUSBプラグ

※USBプラグの上下の向きに
 注意して接続してください。


4極/単極パッドケーブル

トリートメントの準備


まず、次の準備をしてください

- 付属の単三アルカリ電池 (2本) を下記要領にて、電池BOXに正しく収納してください。

①電池蓋のツバを矢印方向に押して、開けてください。

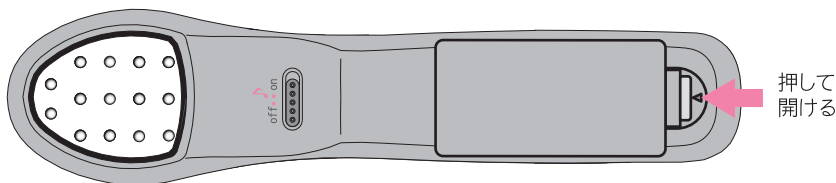

②電池のプラス、マイナスを合わせて収納し、蓋をしてください。

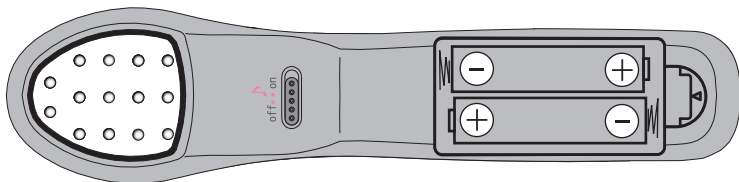

※ 電池が消耗すると、本体上部のランプが暗くなります。
その時は、電池を交換してください。また、長時間使用
しない時は、電池BOXから取り外してください。

トリートメントの準備


ACアダプターを使用する場合

ACアダプターの本体に、ACアダプター接続ケーブルのUSBプラグ側を接続します。

次にACアダプター本体のプラグを家庭用コンセント (AC100V) に接続し、ACアダプター接続ケーブルのマイクロUSBプラグ側を本体のDC.INに接続してください。


この時、電池の電源は自動的にOFFになります。

LEVEL スイッチを右に回転すると電源が入り、本体上部のランプのいずれかが点灯しますが、ここではoffにしておいてください。

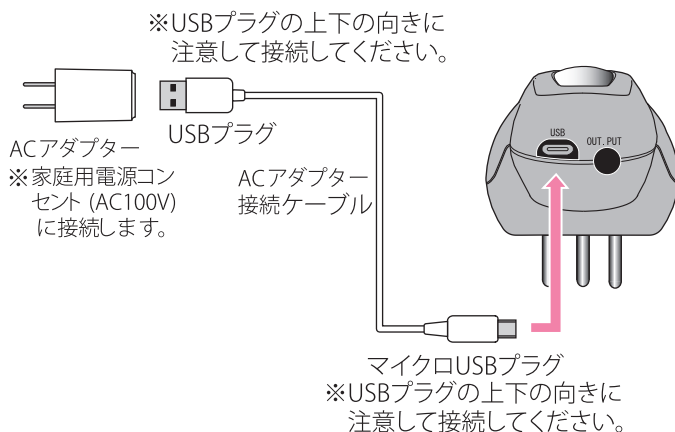

トリートメントの準備

- 市販のコットン2～3枚を水、もしくはミューフルローションを適量含ませピンヘッドの上に置き、ピンホルダーで固定してください。
(水/ミューフルローションの量はコットンを軽くしぼった程度にしてください。)
- これで準備完了です。

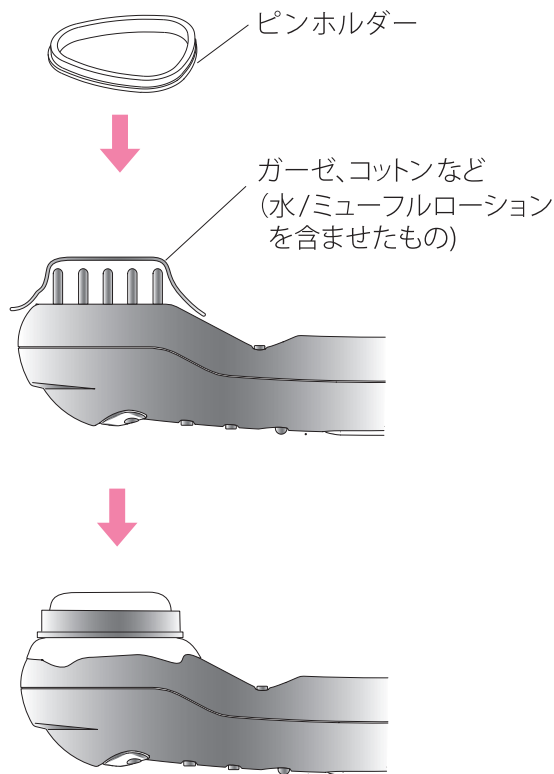


トリートメント方法

(必ず手順に従ってください)

両手の甲のトリートメント

顔、体(ボディ)のトリートメントの前には必ず行ってください。


1. はじめに本体上部の **SHIFT** スイッチをmidにして、**VIB** スイッチをoffにしてください。
2. **LEVEL** ボリュームスイッチを右に回転してonにすると、上部インジケーターのイエローランプが点灯します。
3. 本体の取手プレートを心臓から一番遠い右手でしっかり握り、左手甲にヘッドを当て、**LEVEL** ボリュームをゆっくりと右に回し、やや強くパルス刺激を感じる程度に調節してください。ピンヘッドを手の甲から指先へとゆっくり移動しながら、手全体を2〜3分トリートメントしてください。
 - この時、パルス刺激をやわらげたい方は **VIB** スイッチをonにしてください。
 - パルス刺激をもう少し強く感じたい方は本体上部の **SHIFT** スイッチをhardにしてください。この場合 **LEVEL** は再度調整してください。
 - また、この時本体裏面にある音スイッチ(♪)をonにすればパルス刺激(強/弱のくり返し)の強で音が出ます。
音が出ている時は口から息をゆっくり吐き、音がない時は鼻から空気をお腹が膨れるようゆっくり吸い込み、腹式呼吸を行うと、より効果的です。
音が気になる方は、インジケーターのレッドランプに合わせて行ってください。(点灯時は吐く、消灯時は吸う)
4. 次に手を持ち替え同様に右手甲を2〜3分トリートメントしてください。

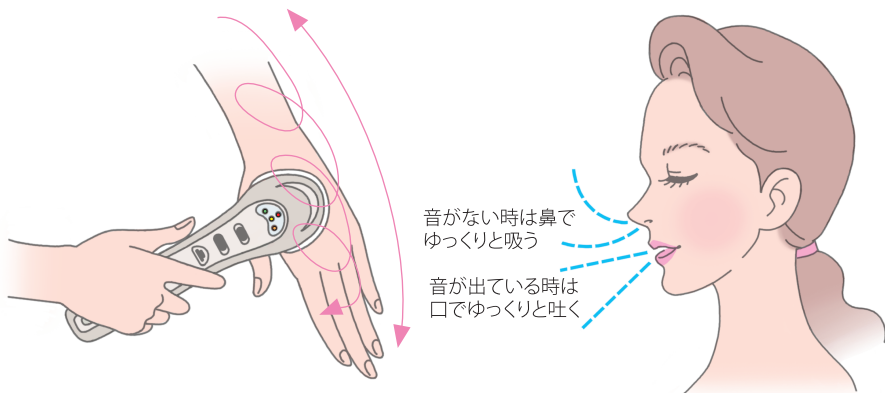

トリートメント方法 (必ず手順に従ってください)

顔、首のトリートメント


1. 先ず、両手の甲のトリートメントを行ってください。
2. 本体上部を右手でしっかり持ち、**SHIFT** スイッチをmid (イエローランプ点灯) にして、ピンヘッドを顔に当て、ややパルス刺激を感じるように**LEVEL** ボリュームを(3～8)に徐々に上げて適度に調整してください。
 - この時、パルス刺激をやわらげたい方は **VIB** スイッチをonにしてください。
3. 最初は両肩、首にトリートメントを行い、あごの下から上にゆっくりヘッドを動かして、顔の口元、目尻へと移行してください。
 - 顔のトリートメントに関しては、なるべく髪の生え際の中まで行ってください。
 - 本体裏面の音スイッチ(♪)をonにして、音のon/offに合わせて腹式呼吸を行うと、より効果的です。
4. トリートメント時間は顔全体でリラックスしながら20～30分位にしてください。

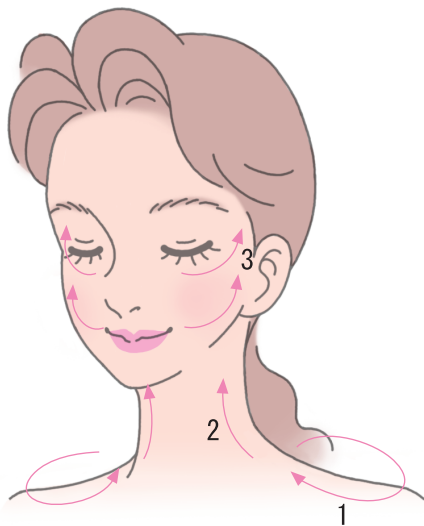

トリートメント方法 (必ず手順に従ってください)

手足、ボディのトリートメント

1. 先ず、両手の甲のトリートメントをしてください。
2. 本体を右手で持ち、上部の **SHIFT** スイッチをmid (イエローランプ点灯) にして、ボディのトリートメント箇所ピンヘッドを当て、パルス刺激をやや強く感じるように **LEVEL** ボリュームを (6~10) に徐々に上げて調整してください。
- この時、パルス刺激をやわらげたい方は **VIB** スイッチをon にしてください。
- パルス刺激をもう少し強く感じたい方は本体上部の **SHIFT** スイッチをhard にしてください。この場合 **LEVEL** は再度調整してください。
- 本体裏面の音スイッチ(♪)をonにして、音のon/offに合わせて腹式呼吸を行うと、より効果的です。
3. トリートメント時間はリラックスしながら20~30分位にしてください。

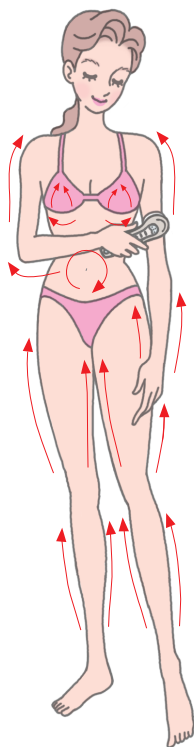

トリートメント方法 (必ず手順に従ってください)


導電性ゲルパッドを使用したトリートメント

E M S (電氣的筋肉刺激) により二の腕、ふくらはぎ、ウエストの引き締めを行います。


1. 付属部品の導電性ゲルパッドに4極パッドケーブルの電極を接続してください。




2. 4極パッドケーブルのプラグを本体出力口(OUT.PUT)に接続してください。

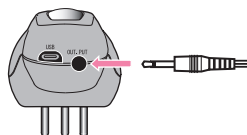

3. 導電性ゲルパッドの粘着面をシートからはがしてください。

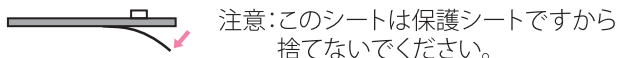

4. 顔の場合はよく洗顔して、その他の箇所についても皮膚面を一度ふき取ってからパッドを下図のようにお貼りください。

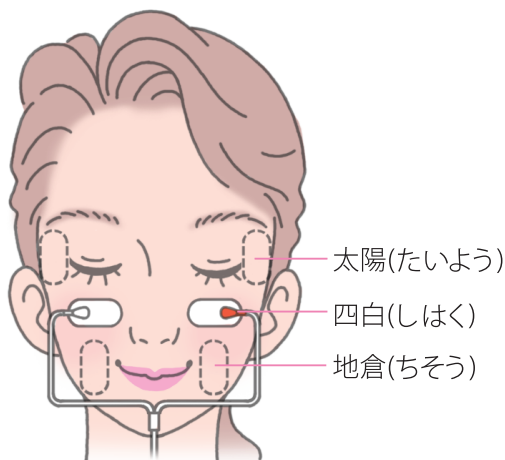


トリートメント方法 (必ず手順に従ってください)


5. 本体上部の **SHIFT** スイッチをmid(イエローランプ点灯)、もしくはsoft(グリーンランプ点灯)にして、**VIB** スイッチはoffにしてください。
LEVEL スイッチをonにしてください。
LEVEL ボリュームを徐々に上げ、パルス刺激を感じるところで止め、パルスの強、弱を体感してください。
- 刺激感は個人差があるため、あまり強くせず、リラックスできる範囲にしてください。
- お腹のEMSの場合、同時に本体を手で持ち、顔、二の腕のトリートメントができます。但し **LEVEL** ボリュームの強さは顔、二の腕に合わせてください。その他の箇所については、本体は手で持たないようにしてください。
- 本体裏面の音スイッチ(♪)をonにして、音のon/offに合わせて腹式呼吸を行うと、より効果的です。
6. トリートメント時間は20分位を目安にしてください。
7. パッドの接続は、目的に応じて、2極または、4極にしてください。

● お腹のトリートメント


* 電極端子を上下もしくは左右を赤、赤／白、白にします。

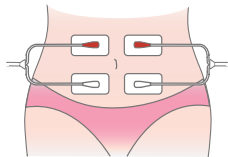

* 腹部を赤、赤／背中を白、白にします。

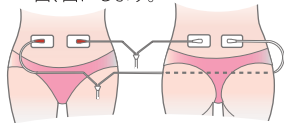


● ヒップのトリートメント

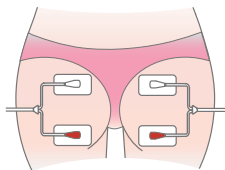


● 二の腕のトリートメント

* 電極端子を二の腕左右に赤、赤／白、白にします。

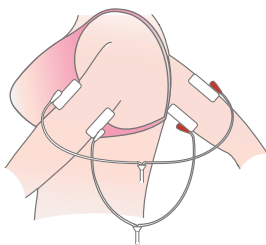


● 太もものトリートメント

* 電極端子を太ももの上下を赤、赤／白、白にします。

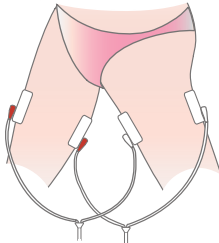


● バストのトリートメント

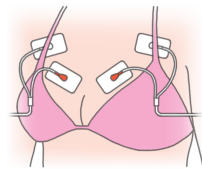

● ふくらはぎのトリートメント


* 電極端子を片側上下を赤、赤／白、白にします。

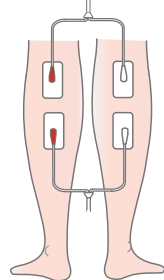

トリートメント方法 (必ず手順に従ってください)


4極パッドを2人で使用する場合のトリートメント

1. 4極パッドケーブル先端の対電極(赤・白)をそれぞれの方のトリートメントしたい箇所に貼ってください。
 2. 本体上部の **SHIFT** スイッチをsoft(グリーンランプ点灯)、もしくはmid(イエローランプ点灯)にして、**VIB** スイッチはoffにしてください。尚、レベルは2人で相談してきめてください。
- この場合、本体は手で持たないようにしてください。

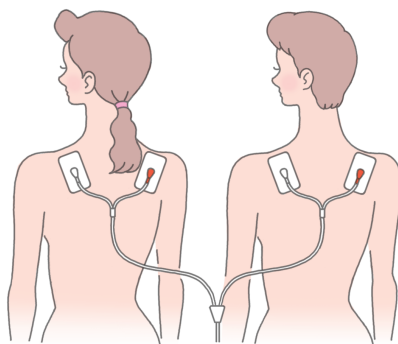

他の方へのトリートメント

- 施術の方が本体を持ちトリートメントを行います。
- 本体後部のOUT.PUTと導電性ゲルパッド(中)または(大)1枚を単極パッドケーブルに接続してください。
- 本体のレベル調整は、必ず施術をお受けになる方に確認してください。

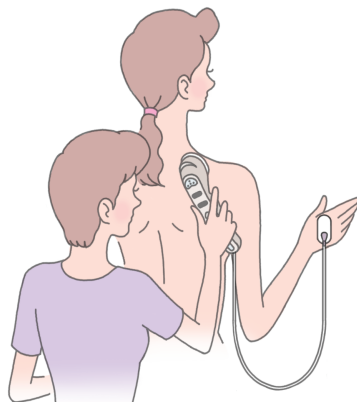

トリートメント方法 (必ず手順に従ってください)

頭皮、髪トリートメント

1. 先ず、両手の甲のトリートメントを行って、その後ピンヘッドが直接頭皮に当たるようにしてください。(コットンを外し、ピンがむき出しの状態にします)
 2. 本体上部の **SHIFT** スイッチをsoft(グリーンランプ点灯)にしてください。
 3. **LEVEL** ボリュームを(3～5)に徐々に上げて適度に調整してください。
 4. ピンヘッドを頭皮に当て、頂部より髪の毛に沿ってゆっくりトリートメントしてください。
 - この時、パルス刺激をやわらげたい方は **VIB** スイッチをonにしてください。
 - パルス刺激が強い場合は **LEVEL** を下げてください。
 - 本体裏面の音スイッチ(♪)をonにして、音のon/offに合わせて複式呼吸を行うと、より効果的です。
5. トリートメント時間はリラックスしながら5～10分位にしてください。



品質保証書

このたびは、ミューフル美顔器をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本機は厳密な出荷検査を行い、高品質を確保いたしておりますが、万一不具合が発生いたしました時は保証規定に基づきお買い上げ後1年間は無償保証させていただきます。

品 名	ミューフル美顔器
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入から1年間
シリアルNo.	
お客様名	
電話番号	
ご住所	(〒 —)

販売店名	印
電話番号	
住所	(〒 —)

販売元 株式会社 美幸コーポレーション
住所 〒107-0062
東京都港区南青6-13-4-307
フリーダイヤル 0120-57-6650

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常なご使用方法で故障した場合は、ご購入日より1年間は無償にて修理いたします。
2. 修理の際は、必ず保証書を添えてください。
3. 本保証書に関しましては日本国内のみ有効です。
4. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - 使用上の誤り、及び不当な修理、改造による故障や損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、電源の異常電圧による故障。
 - 本書の提示が無い場合、又は販売店名、お買い上げ日が無い場合。
 - ご使用中に生じた傷などの外観変化。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - 消耗品
5. 本証は再発行致しませんので大切に保管願います。
6. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
尚保証期間後の修理等につきましては有償とさせていただきます。

主な仕様

電 源： ACアダプター（スイッチング方式）
（AC-100V～240V 50/60Hz 出力電圧：DC5V）
電 池： 1.5V（単三）×2個
出力端子： 3.5mmジャック 1個
重 量： 約170g
外形寸法： 213（W）× 55（H）× 49（D）ミリ

付 属 品：	4極パッドケーブル	1本
	単極パッドケーブル	1本
	携帯用ポーチ	1個
	単三アルカリ電池（1.5V）	2個
	導電性ゲルパッド 小4個/中4個/大4個	
	ピンホルダー	1個
	ACアダプター	1個
	ACアダプター接続ケーブル	1本